

Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Anweisungen vor der Anwendung sorgfältig durch. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

1. EINLEITUNG

EndWarts FREEZE ist eine schnelle Behandlung für zu Hause, die Warzen an Händen, Armen und Füßen wirksam entfernt. Es handelt sich dabei um das erste Mittel für die Selbstbehandlung zu Hause, das Distickstoffmonoxid, ein sehr niedertemperaturiertes Gas, enthält. Durch die Ultra Freeze Technology™ vereist es die Warze bei -80 Grad Celsius und dringt dabei tief in die Warze ein.

EndWarts FREEZE vereist bei einer sehr niedrigen Temperatur (-80°C), die während der gesamten Anwendung erhalten bleibt. EndWarts FREEZE ist mit Abstand die kälteste Vereisungsbehandlung für zu Hause. Dies wurde in einem in-vitro-Temperaturtest* nachgewiesen, der mehrere Vereisungsprodukte für die Selbstbehandlung zu Hause vergleicht. Aus diesem Grund ist EndWarts FREEZE sehr wirksam. In einer klinischen Wirksamkeitsstudie war die Behandlung mit EndWarts FREEZE nach einer Anwendung bei mindestens doppelt so vielen Patienten erfolgreich im Vergleich zu Konkurrenzprodukten*.

EndWarts FREEZE ist ein innovatives Produkt, das schnell und leicht anzuwenden ist. Die Behandlung ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR UND NACH DER BEHANDLUNG BEACHTEN

Sie dürfen EndWarts FREEZE nicht anwenden

- bei Kindern unter 4 Jahren;
- im Gesicht, im Leisten- und Genitalbereich, auf der Kopfhaut oder der Schleimhaut;
- auf gesunder Haut (Haut ohne Warzen);
- auf Warzen, die sich auf empfindlicher Haut befinden. Besondere Vorsicht ist geboten bei der Behandlung von Regionen mit dünner Haut (z.B. um die Gelenke herum);
- wenn die Warze und/oder die sie umgebende Haut blutet, offen, gereizt, infiziert oder gerötet ist oder juckt;
- wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei der Hautveränderung um eine gewöhnliche Warze handelt, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt;
- auf Leberflecken/Muttermalen, Hühneraugen, Blasen, anderen Hautveränderungen oder auf Hautstellen, die möglicherweise Hautkrebs sein könnten (Melanom);
- auf mit Flüssigkeit gefüllten Hautbläschen (sogenanntes „Molluscum contagiosum“), oder auf anderen Hautbläschen;
- bei Diabetikern oder bei Personen, die Probleme mit Durchblutungsstörungen oder Blutgerinnungsstörungen haben;
- Bei einer Gruppe von Warzen oder Warzen, die weniger als 3 cm Abstand zueinander haben: Eine Warze behandeln und 14 Tage warten, bevor Sie die nächste Warze behandeln.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie EndWarts FREEZE anwenden dürfen.

Vorsichtsmassnahmen

- Nicht einatmen. Nur zur äusserlichen Anwendung. Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf.
- Nicht länger als 15 Sekunden auf dünner Haut (Hände, Finger, Zehen, Fussrücken und Arme) oder 40 Sekunden auf dicker, Hornhaut (Fusssohlen) auftragen. Eine übermässig lange oder unsachgemässe Anwendung kann zu Schmerzen und Haut- bzw. Nervenschädigungen führen.
- Kinder dürfen nur von einem Erwachsenen mit EndWarts FREEZE behandelt werden.

* Unterlagen beim Hersteller erhältlich

6. WIE ENDWARTS FREEZE ANGEWENDET WIRD

! BEVOR SIE DIE BEHANDLUNG BEGINNEN LESEN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE

AKTIVIEREN

NUR VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

EndWarts Freeze muss einmal aktiviert werden. Die Kappe nicht abnehmen.



Drehen Sie den **weissen Teil** des Gerätes mindestens **eine volle Umdrehung in Richtung des Pfeils**, bis Sie ein **lautes «Klick» hören**. Hierfür benötigen Sie etwas Kraft.

Niemals diesen Schritt wiederholen nachdem Sie das Gerät erfolgreich aktiviert haben.

1 BELADEN

Vor jeder Behandlung mit EndWarts Freeze muss das Gerät mit kaltem Gas beladen werden.



Stellen Sie **EndWarts FREEZE aufrecht**, mit dem transparenten Teil nach unten, auf einen Tisch. Halten Sie **EndWarts FREEZE** mit einer Hand gut fest, damit es nicht von der Fläche verrutscht. **Drücken** Sie den weissen Teil des Gerätes mit der anderen Hand **genau zwei Sekunden** lang nach unten.

Wenn Sie länger drücken, verschwinden Sie wertvolle Dosiereinheiten, drücken Sie zu kurz, verringert sich der Vereisungseffekt.

2 PRÜFEN



Nehmen Sie die transparente Kappe ab und **wenden Sie das Produkt sofort an!**

Prüfen Sie, ob Sie **Eisdampf** sehen.

Falls kein Eisdampf austritt, wiederholen Sie Schritt 1.

3 BEHANDELN



Drücken Sie die Spitze fest auf die Warze. Für das beste Ergebnis halten Sie bitte die Zeit genau ein!

- **15 Sekunden** auf dünner Haut (Hände, Finger, Zehen, Seite / Oberseite der Füße und Arme).
- **40 Sekunden** auf dicker, verhärteter Haut (Fusssohlen).

Stecken Sie die Kappe wieder auf. **FERTIG!**

Nach Gebrauch im Kühlschrank lagern.

Die Warze verschwindet langsam nach 10-14 Tagen. Falls die Warze (oder ein Teil davon) innerhalb von 14 Tagen nicht verschwunden ist, wiederholen Sie Schritt 1, 2 und 3.



- Distickstoffmonoxid ist ein ungiftiges, nicht brennbares, jedoch brandförderndes Gas. Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen und nicht in der Nähe von offenen Flammen anwenden.

- **Druckbehälter. Kann beim Erhitzen explodieren. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen** – das Gerät steht unter hohem Druck und darf nicht geöffnet werden.

Für ein optimales Ergebnis bei Fusswarzen

Harte Haut auf der Warze erschwert die Vereisung. Um ein optimales Ergebnis bei Fusswarzen zu erzielen:

- Tauchen Sie den betroffenen Bereich in lauwarmes Wasser, bis die Haut weich ist.
- Bei nach innen wachsenden Warzen am Fuss, entfernen Sie gegebenenfalls vorsichtig die darüber liegende Haut z.B. mit einer Fussfeile.
- Vergewissern Sie sich, dass die Warze und die umliegende Haut vor der Behandlung vollständig trocken sind.
- Die Warze selbst soll nicht mit der Feile bearbeitet werden; sie kann weich werden und eine neue harte Oberfläche bilden.

Nach der Behandlung mit EndWarts FREEZE

Die Anwendung von EndWarts FREEZE verursacht ein Kribbeln/Prickeln, und die Haut kann sich wund oder irritiert anfühlen. Dies sollte nach ein paar Stunden nachlassen. Der behandelte Bereich färbt sich unmittelbar nach der Behandlung weiss. Etwas später nimmt die Haut wieder ihre normale Farbe an und die Warze sieht rot aus.

Nach dem Vereisen kann sich innerhalb von wenigen Minuten oder einigen Tagen eine Blase entwickeln, die manchmal mit Blut gefüllt ist. Dabei handelt es sich um eine normale Folge des Vereisungsprozesses, welche für gewöhnlich anzeigt, dass die Behandlung erfolgreich war. Versuchen Sie nicht, diese Blase zu öffnen. Schützen Sie diese, falls erforderlich, mit einem sterilen Verband, oder – falls die Blase aufgegangen ist – desinfizieren Sie diese sachgerecht.

Nach 10 bis 14 Tagen verschwindet die behandelte Warze langsam. Allerdings kann es etwas länger dauern, bis sich die Haut wieder vollständig erholt hat.

Befindet sich die Warze an der Fusssohle, kann das beim Gehen eventuell Schmerzen verursachen. Sie können Linderung schaffen, indem Sie ein rundes Hühneraugenpflaster in diesem Bereich aufkleben.

- Zupfen Sie nicht an der behandelten Stelle oder versuchen Sie nicht die Warze abzulösen!
- Halten Sie den behandelten Bereich sauber und desinfizieren Sie ihn bei Bedarf.
- Baden und Duschen ist sofort nach der Behandlung erlaubt.

Muss ich die Behandlung wiederholen?

EndWarts FREEZE ist sehr wirksam – der Warzenkern wird schnell erreicht und aufgrund der niedrigen Temperaturen zerstört. Normalerweise ist eine einmalige Behandlung ausreichend. Bei alten oder grossen Warzen kann mehr als eine Behandlung erforderlich sein, insbesondere, wenn sich diese unter der Fusssohle befinden.

Die Warze verschwindet langsam nach 10 -14 Tagen. Falls die Warze (oder ein Teil davon) nicht innerhalb von 14 Tagen verschwunden ist, wiederholen Sie die Behandlung und Schritt 1, 2 und 3. Siehe Abschnitt 6 „WIE ENDWARTS FREEZE ANGEWENDET WIRD“.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt:

- wenn Sie oder Ihr Kind unerwartete Nebenwirkungen bemerken.

sources de chaleur/étincelles/flammes nues/surfaces chaudes. Ne pas fumer ou utiliser près d'une flamme nue.

- **Réceptif sous pression. Risque d'explosion s'il est chauffé. Ne pas percer ou brûler la cartouche, même après utilisation** – le dispositif est sous haute pression et ne peut pas être ouvert.

Pour de meilleurs résultats sur les verrues plantaires

La corne qui recouvre la verrue la rend plus difficile à geler. Pour un meilleur résultat sur les verrues plantaires:

- Trempez la zone concernée dans de l'eau tiède jusqu'à ce que la peau soit ramollie.
- Éliminez en douceur la peau recouvrant les verrues qui se sont développées sous la peau des pieds, par ex. à l'aide d'une lime pour pieds.
- Veillez à ce que la verrue et la peau qui l'entoure soient complètement sèches avant de commencer le traitement.
- Ne limez pas la verrue elle-même; cela pourrait la rendre plus tendre et entraîner la formation d'une nouvelle surface dure.

Après avoir utilisé EndWarts FREEZE

L'utilisation EndWarts FREEZE entraînera une sensation de picotement et la peau pourra être douloureuse ou irritée. Ces effets devraient disparaître après quelques heures. Immédiatement après le traitement, la zone traitée blanchira. Après un moment, la peau retrouvera sa couleur habituelle et la verrue sera rouge.

Une ampoule, parfois remplie de sang, peut se développer dans les minutes ou jusqu'à plusieurs jours après la congélation. C'est une conséquence normale du processus de congélation qui indique habituellement que le traitement a été réussi. Ne pas essayer de percer l'ampoule. Si nécessaire, protégez-la avec un pansement stérile, ou désinfectez-la correctement si l'ampoule s'est ouverte.

La verrue traitée disparaîtra lentement au bout de 10 à 14 jours. Il est toutefois possible que la peau mette plus de temps à retrouver son aspect normal.

Si la verrue se trouve sur la plante du pied, il peut être douloureux de marcher dessus. Pour apaiser la douleur, appliquer un pansement rond pour cors sur la zone concernée.

- Ne pas gratter la zone traitée ou essayer d'arracher la verrue!
- Veiller à ce que la zone traitée reste propre et la désinfecter si nécessaire.
- Le bain ou la douche est autorisé immédiatement après le traitement.

Est-il nécessaire de répéter le traitement?

EndWarts FREEZE est très efficace – le centre de la verrue sera rapidement atteint et sera détruit par le froid. Habituellement, un seul traitement est suffisant. Les vieilles verrues ou les plus grosses verrues pourront nécessiter plus d'un traitement, surtout si elles se trouvent sous la plante du pied.

La verrue disparaîtra progressivement au bout de 10 à 14 jours. Si elle ne disparaît pas dans les 14 jours ou s'il en reste une partie, répétez le traitement et les étapes 1,2 et 3. Voir partie 6. COMMENT UTILISER ENDWARTS FREEZE.

Consultez votre médecin:

- si vous ou votre enfant présentez un effet secondaire inattendu
- si la verrue ne guérit pas
- si la verrue ne disparaît pas après 3 traitements.

- wenn die Warze nicht abheilt.
- wenn die Warze nach drei Behandlungen nicht verschwunden ist.

3. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen:

- Blasen (möglicherweise Blutblasen) um den behandelten Bereich – das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, siehe Punkt 2: „Nach der Behandlung mit EndWarts FREEZE“.
- Die Haut verliert ihre Farbe – man nennt das „Depigmentierung“.
- Leichte Verbrennungen und Narbenbildung.
- Risiko von Haut- bzw. Nervenschädigung (z.B. im Falle einer zu langen Anwendungsdauer).
- Vorübergehende sensorische Störung (ein kribbelndes, prickelndes Gefühl).

4. WIE IST ENDWARTS FREEZE AUFZUBEWAHREN

Vor der ersten Anwendung:

- Trocken und kühl lagern (zwischen 5 – 25°C). Vor Sonnenlicht schützen.
- Nicht im Gefrierschrank aufbewahren.
- Zu keinem Zeitpunkt Temperaturen über 50°C aussetzen. Nicht im Auto, Wohnwagen oder an anderen Orten, die sich aufheizen, aufbewahren. Ein Temperaturanstieg schädigt das Gerät und macht es dauerhaft funktionsunfähig.

Nach jedem Gebrauch:

- Kappe aufstecken und **im Kühlschrank lagern**, dadurch verlängert sich die Haltbarkeit von EndWarts FREEZE und es erhöht sich die Anzahl der möglichen Anwendungen.
- Nicht im Gefrierschrank aufbewahren.
- Während der Lagerung bzw. Aufbewahrung das aktivierte Gerät nicht Temperaturen über 35°C aussetzen, da sonst ein Sicherheitsmechanismus aktiviert wird, welcher das Gerät dauerhaft funktionsunfähig macht.

- Warten Sie nach Gebrauch zwei Minuten, entsorgen Sie die Einweg-Spitze und ersetzen Sie diese durch eine neue. EndWarts FREEZE ist nun für die nächste Anwendung einsatzbereit.
- Falls Sie die Kunststoffteile des Gerätes reinigen, verwenden Sie dafür nur ein feuchtes Tuch.

5. WEITERE INFORMATIONEN

Verpackung und Verfallsdatum

- Jede Packung enthält ein EndWarts FREEZE-Gerät (7,5 g verflüssigtes Distickstoffmonoxid), ein Set mit 7 Einweg-Spitzen sowie eine Gebrauchsanweisung.
- 2 Sekunden vor der Anwendung beladen. Das Gerät reicht für bis zu 7 Behandlungen.
- Haltbarkeit im Kühlschrank nach der Aktivierung: 2 Monate.
- Sie dürfen dieses Produkt nach dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.
- Entsorgen Sie das leere Produkt.

Was müssen Sie tun, wenn das Gerät leer oder funktionsunfähig ist

- Wenn nach erfolgreicher Aktivierung (Schritt 1) und Beladung des Gerätes (Schritt 2) kein Eisdampf zu sehen ist, ist das Gas verbraucht. Benutzen Sie einen neuen EndWarts FREEZE.
- Wenn nach der Aktivierung des Gerätes ein kontinuierliches Zischen zu hören ist und das Gas ausläuft, ist das Gerät defekt. Versuchen Sie nicht, dieses zu öffnen oder selbst zu reparieren, auch wenn Sie glauben, dass es leer ist. Geben Sie das Produkt in Ihrer Apotheke zurück.

Mode d'emploi

Lire attentivement la notice avant utilisation. Gardez cette notice; vous pourriez avoir besoin de la relire.

1. INTRODUCTION

EndWarts FREEZE est un traitement à domicile rapide qui permet d'éliminer efficacement les verrues sur les mains, les bras et les pieds. Il s'agit du premier traitement à domicile à base de protoxyde d'azote, un gaz très froid. Grâce à la technologie Ultra Freeze Technology™, il gèle la verrue à -80°C et permet d'atteindre la couche la plus profonde de la verrue.

EndWarts FREEZE gèle à très basse température (-80°C), une température préservée pendant toute la durée d'utilisation. EndWarts FREEZE est de loin le traitement à domicile par congélation le plus froid du marché, comme l'a montré un test thermique* in vitro ayant comparé plusieurs produits de congélation destinés à un usage à domicile. C'est pour cette raison que EndWarts FREEZE est très efficace. Dans une étude d'efficacité clinique, le traitement par EndWarts FREEZE a réussi après une seule application chez au moins deux fois plus de patients en comparaison avec des produits concurrents*.

EndWarts FREEZE est un dispositif avec une technologie de pointe qui est d'utilisation rapide et simple. Le traitement convient aux adultes et aux enfants de plus de 4 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT ET APRÈS LE TRAITEMENT

Ne jamais utiliser EndWarts FREEZE

- chez les enfants de moins de 4 ans;
- sur le visage, l'aîne, les parties génitales, le cuir chevelu ou les muqueuses;
- sur une peau saine (peau exempte de verrues);
- sur les verrues situées sur une zone de peau sensible et faire très attention lorsque vous traitez des zones fines de la peau (p. ex. près des articulations);
- si la verrue et/ou la peau qui l'entoure saigne ou est ouverte, démange, est irritée, infectée ou rouge;
- si vous n'êtes pas sûr(e) que la grosseur est une verrue commune, consultez votre médecin avant utilisation;
- sur les grains de beauté, les cors, les ampoules, les autres imperfections cutanées ou tout ce qui pourrait être un cancer de la peau (mélanome);
- sur des vésicules de la peau remplies de liquide (appelées «molluscum contagiosum») ou toute autre vésicule ou des ampoules;
- si vous souffrez de diabète et/ou de problèmes de circulation sanguine ou de coagulation du sang;
- En cas de verrues groupées ou rapprochées de moins de 3 cm: traiter une verrue et attendre 14 jours avant de traiter la suivante.
- Si vous êtes enceinte ou allaitez, veuillez consulter votre médecin pour savoir si vous pouvez utiliser EndWarts FREEZE.

Précautions de sécurité

- Ne pas inhaler. Pour usage externe uniquement. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne pas appliquer plus de 15 secondes sur la peau fine (des mains, doigts, orteils, côtés / dessus des pieds et bras), ou 40 secondes sur la peau épaisse et insensible (plante des pieds). Une application excessive ou incorrecte peut provoquer une douleur ou entraîner des lésions cutanées ou nerveuses.
- EndWarts FREEZE doit être utilisé par un adulte en cas de traitement de verrues chez l'enfant.
- Le protoxyde d'azote est un gaz non toxique et non inflammable; il favorisera toutefois la combustion en cas de feu. Tenir éloigné des


* Les documents sont disponibles auprès du fabricant

Suite à la page suivante ►

ACTIVER

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
UNIQUEMENT

EndWarts Freeze doit être activé une seule fois. Ne retirez pas le capuchon.

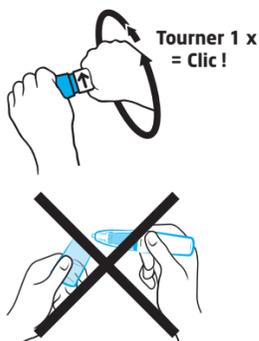

Visser la partie blanche du dispositif au minimum un tour complet en direction de la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » fort; cela nécessite une certaine force.

Ne jamais répéter cette étape après avoir activé correctement le dispositif.

1 CHARGER

Le dispositif doit être rempli de gaz froid avant chaque traitement par EndWarts Freeze.



Placez EndWarts FREEZE à la verticale sur une table, le capuchon transparent en bas sur une table. Tenez fermement EndWarts FREEZE d'une main pour qu'il ne glisse pas.

Avec l'autre main, appuyez assez fortement sur la partie blanche du dispositif pendant exactement 2 secondes.

Une pression plus longue entraîne la perte de précieuses doses; une pression plus courte réduit l'effet de congélation.

2 CONTRÔLER



Enlevez le capuchon transparent et utilisez le produit immédiatement!

Vérifiez que de la vapeur de glace soit bien visible.

En l'absence de vapeur de glace, répétez l'étape 1.

3 TRAITER



Appuyez fermement l'embout contre la verrue. La durée est essentielle pour l'obtention de résultats optimaux!


- 15 secondes sur la peau fine (des mains, doigts, orteils, côtés / dessus des pieds et bras).
- 40 secondes sur la peau épaisse et insensible (plante des pieds).

Remette le bouchon. LE TRAITEMENT EST FINI!

Après utilisation, conserver au réfrigérateur.

La verrue disparaîtra progressivement au bout de 10 à 14 jours. Si elle ne disparaît pas dans les 14 jours ou s'il en reste une partie, répétez le traitement et les étapes 1, 2 et 3.

6°C

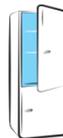

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare queste istruzioni per l'uso per poterle rileggere all'occorrenza.

1. INTRODUZIONE

EndWarts FREEZE è un trattamento rapido da eseguire a casa per rimuovere efficacemente le verruche da mani, braccia e piedi. Si tratta del primo strumento per l'autotrattamento contenente protossido di azoto, un gas a temperatura molto bassa che, grazie all'Ultra Freeze Technology™, congela la verruca a -80 °C e raggiunge gli strati più profondi della verruca.

EndWarts FREEZE congela ad una temperatura estremamente bassa (-80°C), che viene mantenuta durante l'intero trattamento. EndWarts FREEZE è di gran lunga l'autotrattamento di crioterapia alla temperatura più bassa. Ciò è stato dimostrato da un test termico* in vitro comparativo su diversi prodotti per l'autotrattamento con crioterapia. Per questo motivo EndWarts FREEZE è estremamente efficace. In uno studio clinico di efficacia, il trattamento con EndWarts FREEZE ha avuto successo dopo una sola applicazione in un numero di pazienti almeno doppio rispetto ai prodotti della concorrenza*.

EndWarts FREEZE è un prodotto innovativo, rapido e facile da usare. Il trattamento è adatto agli adulti e ai bambini dai 4 anni in su.

2. COSA BISOGNA SAPERE PRIMA E DOPO IL TRATTAMENTO

EndWarts FREEZE non deve essere utilizzato:

- nei bambini al di sotto dei 4 anni;
- su viso, area inguinale e genitale, cuoio capelluto o mucose;
- sulla cute sana (pelle senza verruche);
- su verruche localizzate su pelle sensibile. È necessario prestare particolare attenzione nel trattamento di aree con cute sottile (per es. in prossimità di articolazioni);
- se la verruca e/o la cute circostante sanguina, è aperta, irritata, infetta o arrossata oppure causa prurito;
- se non si è sicuri che l'alterazione cutanea sia una verruca comune consultare il proprio medico prima dell'uso;
- su nevi, calli, vesciche, altre alterazioni cutanee o su punti della cute che potrebbero essere tumori cutanei (melanomi);
- su vescicole contenenti liquido (il cosiddetto "molluscum contagiosum") o su altre vescicole cutanee;
- nei diabetici o nelle persone con problemi di circolazione sanguigna o disturbi della coagulazione sanguigna;
- Su verruche riunite in gruppo o più vicine di 3 cm: trattare una verruca e attendere 14 giorni prima di trattare la successiva.
- Se è incinta o sta allattando, chiedi al tuo medico se puoi usare EndWarts FREEZE.

Misure di sicurezza

- Non inalare. Solo per uso esterno. Conservare il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Non applicare per più di 15 secondi su pelle sottile (mani, dita delle mani/ dei piedi, lato/punta dei piedi e braccia) o 40 secondi su pelle ispessita, callosa (piante dei piedi). Un'applicazione eccessivamente lunga o non corretta può causare dolore e danneggiare la cute o i nervi.
- I bambini possono essere trattati con EndWarts FREEZE solo da un adulto.
- Il protossido di azoto è un gas atossico, non infiammabile ma comburente. Tenere lontano da calore, scintille, fiamme libere e superfici molto calde. Non fumare e non utilizzare vicino a fiamme libere.
- Il contenitore è pressurizzato e può esplodere se scaldato. Non forzare l'apertura né bruciare la cartuccia neanche dopo l'impiego: il dispositivo è sotto alta pressione e non deve essere aperto.

* La documentazione è disponibile presso il produttore.

6. COME SI APPLICA ENDWARTS FREEZE

! PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO LEGGERE I SEGUENTI PASSAGGI

ATTIVARE

SOLO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

EndWarts Freeze deve essere attivato una sola volta. Non togliere ancora il cappuccio.



Avvitare la parte bianca del dispositivo di almeno un giro completo in direzione della freccia finché si sente un forte clic. A tal fine è necessario applicare un po' di forza.

Non ripetere mai questo passo dopo aver attivato con successo il dispositivo.

1 CARICARE

Prima di ciascun trattamento con EndWarts Freeze, si deve caricare il dispositivo con gas freddo.



Posizionare EndWarts FREEZE in posizione verticale, con il cappuccio trasparente rivolto in basso, su un tavolo. Con una mano tenere ben fermo EndWarts FREEZE in modo che non scivoli dalla superficie. Con l'altra mano premere la parte bianca del dispositivo verso il basso per due secondi esatti.

Se si preme più a lungo, si spreca dosi preziose, mentre se si preme troppo brevemente, si riduce l'effetto congelamento.

2 CONTROLLARE



Rimuovere il cappuccio trasparente e applicare il prodotto immediatamente!

Controllare se è visibile del vapore freddo.

Se il vapore freddo non fuoriesce, ripetere il punto 1.

3 TRATTARE



Premere con decisione la punta sulla verruca. Per un migliore risultato rispettare esattamente il tempo indicato!

- 15 secondi su pelle sottile (mani, dita delle mani/dei piedi, lato/punta dei piedi e braccia)
- 40 secondi su pelle ispessita, callosa (piante dei piedi)

Rimettere il cappuccio. FATTO!

Dopo l'uso conservare in frigorifero.

La verruca scompare lentamente dopo 10-14 giorni. Se la verruca (o una sua parte) non scompare entro 14 giorni, ripetere i punti 1, 2 e 3.

6°C

