


ARTICOLO	PROSPETTO		ENDWARTS FREEZE		MULTILINGUA	DESTINAZIONE
	PESA	FORMATO	CODICE PROD.	EDIZIONE	DIM. MIN. FONT	
<b>MEDA</b>	45 x 135 MM	270 x 545 MM	7967		6,3 PT	
<b>COLORI: 2</b>	<b>CYAN</b>	<b>NERO</b>				

FILE DIGITALE DI PROPRIETÀ DELLA ROTTAPHARM S.p.A.

VIETATA LA MANOMISSIONE - RENDERE DOPO L'USO

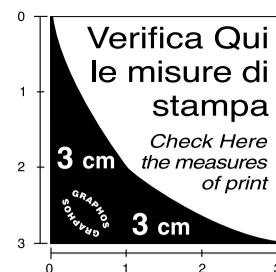

# EndWarts<sup>®</sup> FREEZE

## WIRKSAME WARZENENTFERNUNG ÉLIMINE EFFICACEMENT LES VERRUES RIMOZIONE EFFICACE DELLE VERRUCHE

### Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Anweisungen vor der Anwendung sorgfältig durch. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

#### 1. EINLEITUNG

EndWarts FREEZE ist eine schnelle Behandlung für zu Hause, die Warzen an Händen, Armen und Füßen wirksam entfernt. Es handelt sich dabei um das erste Mittel für die Selbstbehandlung zu Hause, das Distickstoffmonoxid, ein sehr niedertemperaturiertes Gas, enthält. Durch die Ultra Freeze Technology™ vereist es die Warze bei -80 Grad Celsius und dringt dabei tief in die Warze ein.

EndWarts FREEZE vereist bei einer sehr niedrigen Temperatur (-80°C), die während der gesamten Anwendung erhalten bleibt. EndWarts FREEZE ist mit Abstand die kälteste Vereisungsbehandlung für zu Hause. Dies wurde in einem In-vitro-Temperaturtest\* nachgewiesen, der mehrere Vereisungsprodukte für die Selbstbehandlung zu Hause vergleicht. Aus diesem Grund ist EndWarts FREEZE sehr wirksam.

EndWarts FREEZE ist ein innovatives Produkt, das schnell und leicht anzuwenden ist. Die Behandlung ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet.

#### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR UND NACH DER BEHANDLUNG BEACHTEN

##### Sie dürfen EndWarts FREEZE nicht anwenden

- bei Kindern unter 4 Jahren;
- im Gesicht, im Leisten- und Genitalbereich, auf der Kopfhaut oder der Schleimhaut;
- auf gesunder Haut (Haut ohne Warzen);
- auf Warzen, die sich auf empfindlicher Haut befinden. Besondere Vorsicht ist geboten bei der Behandlung von Regionen mit dünner Haut;
- wenn die Warze und/oder die sie umgebende Haut blutet, offen, gereizt, infiziert oder gerötet ist oder juckt;
- wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei der Hautveränderung um eine gewöhnliche Warze handelt, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt;
- auf Leberflecken/Muttermalen, Hühneraugen, Blasen, anderen Hautveränderungen oder auf Hautstellen, die möglicherweise Hautkrebs sein könnten (Melanom);
- auf mit Flüssigkeit gefüllten Hautbläschen (sogenanntes „Molluscum contagiosum“), oder auf anderen Hautbläschen;
- wenn Sie schwanger sind oder stillen;
- bei Diabetikern bzw. bei Personen, die Kreislaufprobleme oder Blutgerinnungsstörungen haben;
- auf mehreren Warzen zur gleichen Zeit, wenn diese eng beieinander liegen. Warten Sie 14 Tage, bevor Sie die nächste Warze behandeln.

##### Vorsichtsmassnahmen

- Nicht einatmen. Nur zur äusserlichen Anwendung. **Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf.**
- Nicht länger als 15 Sekunden auf Händen und Armen bzw. 40 Sekunden auf den Füßen anwenden. Eine übermässig lange oder unsachgemässe Anwendung kann zu Schmerzen und Haut- bzw. Nervenschädigungen führen.
- Kinder dürfen nur von einem Erwachsenen mit EndWarts FREEZE behandelt werden.
- Distickstoffmonoxid ist ein ungiftiges, nicht brennbares, jedoch brandförderndes Gas. Von offenen Flammen und leicht brennbaren Materialien fernhalten. Nicht rauchen und nicht in der Nähe von offenen Flammen anwenden.
- **Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen** – das Gerät steht unter hohem Druck und darf nicht geöffnet werden.

\* Unterlagen beim Hersteller erhältlich


#### 6. WIE ENDWARTS FREEZE ANGEWENDET WIRD

### ! BEVOR SIE DIE BEHANDLUNG BEGINNEN LESEN SIE SCHRITT 1 - 4.

#### 1 AKTIVIEREN

##### NUR VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH!

EndWarts Freeze muss einmal aktiviert werden.

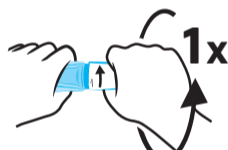

Führen Sie mit der Kappe mind. eine volle Umdrehung aus, bis sich der Stern und der graue Streifen wieder auf gleicher Höhe befinden. **Hierfür benötigen Sie etwas Kraft.**

Es ist nicht schlimm, wenn Sie den Stern über den grauen Streifen hinaus drehen.

**Niemals Schritt 1 wiederholen, nachdem Sie das Gerät erfolgreich aktiviert haben.**

#### 2 BELADEN

Vor jeder Behandlung mit EndWarts Freeze muss das Gerät mit kaltem Gas beladen werden.



Stellen Sie EndWarts FREEZE aufrecht, mit dem transparenten Teil nach unten, auf einen Tisch. Halten Sie EndWarts FREEZE mit einer Hand gut fest, damit es nicht von der Fläche verrutscht. Drücken Sie den weissen Teil des Gerätes mit der anderen Hand **zwei Sekunden** lang nach unten, wobei ein zischendes Geräusch zu hören ist.

Wenn Sie länger drücken, verschwinden Sie wertvolle Dosiereinheiten, drücken Sie zu kurz, verringert sich der Vereisungseffekt.

#### 3 PRÜFEN



Nehmen Sie die transparente Kappe ab und **wenden Sie das Produkt sofort an!**

Prüfen Sie, ob Sie **Eisdampf sehen**.

Falls kein Eisdampf austritt, wiederholen Sie Schritt 2.


#### 4 BEHANDELN



Drücken Sie die Spitze von EndWarts FREEZE fest auf die Warze. **Für das beste Ergebnis halten Sie bitte die Zeit genau ein!**

- **15 Sekunden** an Händen, Fingern und am Arm
- **40 Sekunden** an den Füßen

**Stecken Sie die Kappe wieder auf. FERTIG! Nach Gebrauch im Kühlschrank lagern** **6°C**

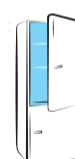

Die Warze verschwindet langsam nach 10-14 Tagen. Falls die Warze (oder ein Teil davon) innerhalb von 14 Tagen nicht verschwunden ist, wiederholen Sie Schritt 2, 3 und 4.

### Mode d'emploi

Lire attentivement la notice avant utilisation. Gardez cette notice; vous pourriez avoir besoin de la relire.

#### 1. INTRODUCTION

EndWarts FREEZE est un traitement à domicile rapide qui permet d'éliminer efficacement les verrues sur les mains, les bras et les pieds. Il s'agit du premier traitement à domicile à base de protoxyde d'azote, un gaz très froid. Grâce à la technologie Ultra Freeze Technology™, il gèle la verrue à -80°C et permet d'atteindre la couche la plus profonde de la verrue.

EndWarts FREEZE gèle à très basse température (-80 °C), une température préservée pendant toute la durée d'utilisation. EndWarts FREEZE est de loin le traitement à domicile par congélation le plus froid du marché, comme l'a montré un test thermique\* in vitro ayant comparé plusieurs produits de congélation destinés à un usage à domicile. C'est pour cette raison que EndWarts FREEZE est très efficace.

EndWarts FREEZE est un dispositif avec une technologie de pointe qui est d'utilisation rapide et simple. Le traitement convient aux adultes et aux enfants de plus de 4 ans.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT ET APRÈS LE TRAITEMENT

##### Ne jamais utiliser EndWarts FREEZE

- chez les enfants de moins de 4 ans;
- sur le visage, l'aine, les parties génitales, le cuir chevelu ou les muqueuses;
- sur une peau saine (peau exempte de verrues);
- sur les verrues situées sur une zone de peau sensible et faire très attention lorsque vous traitez des zones fines de la peau;
- si la verrue et/ou la peau qui l'entoure saigne ou est ouverte, démange, est irritée, infectée ou rouge;
- si vous n'êtes pas sûr(e) que la grosseur est une verrue commune, consultez votre médecin avant utilisation;
- sur les grains de beauté, les cors, les ampoules, les autres imperfections cutanées ou tout ce qui pourrait être un cancer de la peau (mélanome);
- sur des vésicules de la peau remplies de liquide (appelées «molluscum contagiosum») ou toute autre vésicule ou des ampoules;
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez;
- si vous souffrez de diabète et/ou de problèmes de circulation ou de coagulation du sang;
- sur plusieurs verrues à la fois si elles sont rapprochées. Attendre 14 jours avant de traiter la prochaine verrue.

##### Précautions de sécurité

- Ne pas inhaler. Pour usage externe uniquement. **Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.**
- Ne pas appliquer pendant plus de 15 secondes sur les mains et les bras ou plus de 40 secondes sur les pieds. Une application excessive ou incorrecte peut provoquer une douleur ou entraîner des lésions cutanées ou nerveuses.
- EndWarts FREEZE doit être utilisé par un adulte en cas de traitement de verrues chez l'enfant.
- Le protoxyde d'azote est un gaz non toxique et non inflammable; il favorisera toutefois la combustion en cas de feu. Tenir éloigné des flammes ou de matériaux qui brûlent facilement. Ne pas fumer ou utiliser près d'une flamme nue.
- **Ne jamais percer ou brûler la cartouche, même après utilisation** – le dispositif est sous haute pression et ne peut pas être ouvert.

### Pour de meilleurs résultats sur les verrues plantaires

La corne qui recouvre la verrue la rend plus difficile à geler. Pour un meilleur résultat sur les verrues plantaires:



- Trempez la zone concernée dans de l'eau tiède jusqu'à ce que la peau soit ramollie.
- Éliminez en douceur la peau recouvrant les verrues qui se sont développées sous la peau des pieds, par ex. à l'aide d'une lime pour pieds.
- Veillez à ce que la verrue et la peau qui l'entoure soient complètement sèches avant de commencer le traitement.

- Ne limez pas la verrue elle-même; cela pourrait la rendre plus tendre et entraîner la formation d'une nouvelle surface dure.

##### Après avoir utilisé EndWarts FREEZE

L'utilisation EndWarts FREEZE entraînera une sensation de picotement et la peau pourra être douloureuse. Ces effets devraient disparaître après quelques heures. Immédiatement après le traitement, la zone traitée blanchira. Après un moment, la peau retrouvera sa couleur habituelle et la verrue sera rouge.

Une ampoule, parfois remplie de sang, peut se développer dans les minutes ou jusqu'à plusieurs jours après la congélation. C'est une conséquence normale du processus de congélation qui indique habituellement que le traitement a été réussi. Ne pas essayer de percer l'ampoule. Si nécessaire, protégez-la avec un pansement stérile, ou désinfectez-la correctement si l'ampoule s'est ouverte.

La verrue traitée disparaîtra lentement au bout de 10 à 14 jours. Il est toutefois possible que la peau mette plus de temps à retrouver son aspect normal.

Si la verrue se trouve sur la plante du pied, il peut être douloureux de marcher dessus. Pour apaiser la douleur, appliquez un pansement rond pour cors sur la zone concernée.

- Ne pas gratter la zone traitée ou essayer d'arracher la verruel
- Veiller à ce que la zone traitée reste propre et la désinfecter si nécessaire.
- Le bain ou la douche est autorisé immédiatement après le traitement.

##### Est-il nécessaire de répéter le traitement?

EndWarts FREEZE est très efficace – après seulement quelques secondes d'utilisation, le cœur de la verrue sera atteint et détruit par le froid. Habituellement, un seul traitement est suffisant. Les vieilles verrues ou les plus grosses verrues pourront nécessiter plus d'un traitement, surtout si elles se trouvent sous la plante du pied.

La verrue disparaîtra progressivement au bout de 10 à 14 jours. Si elle ne disparaît pas dans les 14 jours ou s'il en reste une partie, répétez le traitement et les étapes 2, 3 et 4. Voir partie 6. COMMENT UTILISER ENDWARTS FREEZE.

##### Consultez votre médecin:

- si vous ou votre enfant présentez un effet secondaire inattendu
- si la verrue ne guérit pas
- si la verrue ne disparaît pas après 3 traitements.

#### 3. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

##### Les effets indésirables possibles sont notamment les suivants:

- Ampoules autour de la zone traitée – variable en fonction des cas, voir dans la rubrique 2 "Après avoir utilisé EndWarts FREEZE".
- Décoloration de la peau appelée « dépigmentation ».

- Brûlures mineures et formation de cicatrices.
- Risque de lésions cutanées/nerveuses (en cas d'application excessive).


#### 4. COMMENT CONSERVER ENDWARTS FREEZE

##### Avant la première utilisation

- À conserver dans un endroit sec et frais (entre 5 et 25°C).
- Ne pas conserver au congélateur.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas conserver dans des voitures, des caravanes ou d'autres endroits dans lesquels la température peut monter. Une augmentation de la température endommagera le dispositif et le rendra définitivement inutilisable.
- Tenir éloigné du feu et des sources de chaleur.

##### Après chaque utilisation

- Remettre le bouchon et conserver au réfrigérateur – cela permettra d'augmenter la durée de conservation d'EndWarts FREEZE et d'augmenter le nombre de doses utilisables.
- Ne pas conserver au congélateur.

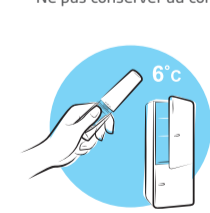

- Ne pas exposer le dispositif activé à des températures supérieures à 35°C; cela activerait une fonctionnalité de sécurité qui rendrait le dispositif définitivement inutilisable.
- Attendre deux minutes après utilisation, jeter l'embout et insérer un nouvel embout jetable. EndWarts FREEZE est maintenant prêt pour l'utilisation suivante.
- Utiliser un chiffon humide uniquement pour nettoyer les parties en plastique du dispositif.

#### 5. AUTRES INFORMATIONS

##### Emballage et date de péremption

- Un emballage comprend une cartouche EndWarts FREEZE contenant 7,5 g de protoxyde d'azote (liquide), un jeu de 6 embouts jetables et une notice d'utilisation.
- Durée de conservation au réfrigérateur après la première activation: 2 mois.
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Éliminer le dispositif vide.


##### Que faire si le dispositif est vide ou cassé:

- Si vous ne voyez ni gel ni vapeur de glace après une activation réussie (étape 1) et le chargement du dispositif (étape 2), cela signifie qu'il n'y a plus de gaz – utiliser un autre EndWarts FREEZE.
- En cas de sifflement continu après l'activation et échappement du gaz, le dispositif est cassé. Ne pas essayer de l'ouvrir ou de le réparer vous-même, même si vous pensez qu'il est vide – le rapporter à la pharmacie.

<b>MEDA</b>	ARTICOLO	PROSPETTO	PRODOTTO	ENDWARTS FREEZE	LINGUA	MULTILINGUA	DESTINAZIONE	VENDITA
	PIE'GA	45 x 135 MM	FORMATO	270 x 545 MM	CODICE PROD.	7967	EDIZIONE	DIM. MIN. FONT
COLORI: 2		CYAN	NERO					

FILE DIGITALE DI PROPRIETÀ DELLA ROTTAPHARM S.p.A.

VIETATA LA MANOMISSIONE - RENDERE DOPO L'USO

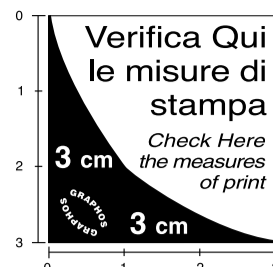


## 6. COMMENT UTILISER ENDWARTS FREEZE

## ! AVANT DE COMMENCER LE TRAITEMENT, LISEZ LA DESCRIPTION DES ÉTAPES 1 À 4.

## 1 ACTIVER

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION UNIQUEMENT!

EndWarts Freeze doit être activé une seule fois.

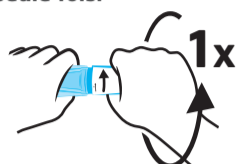

Visser au minimum un tour complet jusqu'à ce que l'étoile se trouve à nouveau au-dessus de la marque grise; cela nécessite une certaine force.

Ne vous inquiétez pas si vous faites dépasser l'étoile hors de la zone grisée.

**Ne jamais répéter l'étape 1 après avoir activé correctement le dispositif.**

## 2 CHARGER

Le dispositif doit être rempli de gaz froid **avant chaque traitement** par EndWarts Freeze.



Placez EndWarts FREEZE à la verticale sur une table, la partie transparente en bas sur une table. Tenez fermement EndWarts FREEZE d'une main pour qu'il ne glisse pas.

Avec l'autre main, appuyez assez fortement sur la partie blanche du dispositif pendant **exactement 2 secondes**, on entend alors un chuintement.

Une pression plus longue entraîne la perte de précieuses doses; une pression plus courte réduit l'effet de congélation.

## 3 CONTRÔLER



Enlevez le capuchon transparent et **utilisez le produit immédiatement.**

Vérifiez que de la **vapeur de glace** soit bien **visible.**

En l'absence de vapeur de glace, répétez l'étape 2.

## 4 TRAITER



Appuyez fermement l'embout d'EndWarts FREEZE contre la verrue. **La durée est essentielle pour l'obtention de résultats optimaux.**

- 15 secondes sur les mains, les doigts et les bras.
- 40 secondes sur les pieds.

**Remettre le bouchon. LE TRAITEMENT EST FINI! 6°C**

Après utilisation, **conserver au réfrigérateur.**

La verrue disparaîtra progressivement au bout de 10 à 14 jours. Si elle ne disparaît pas dans les 14 jours ou s'il en reste une partie, répétez le traitement et les étapes 2, 3 et 4.

## Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare queste istruzioni per l'uso per poterle rileggere all'occorrenza.

## 1. INTRODUZIONE

EndWarts FREEZE è un trattamento rapido da eseguire a casa per rimuovere efficacemente le verruche da mani, braccia e piedi. Si tratta del primo strumento per l'autotrattamento contenente protossido di azoto, un gas a temperatura molto bassa che, grazie all'Ultra Freeze Technology™, congela la verruca a -80 °C e raggiunge gli strati più profondi della verruca.

EndWarts FREEZE congela ad una temperatura estremamente bassa (-80°C), che viene mantenuta durante l'intero trattamento. EndWarts FREEZE è di gran lunga l'autotrattamento di crioterapia alla temperatura più bassa. Ciò è stato dimostrato da un test termico\* in vitro comparativo su diversi prodotti per l'autotrattamento con crioterapia. Per questo motivo EndWarts FREEZE è estremamente efficace.

EndWarts FREEZE è un prodotto innovativo, rapido e facile da usare. Il trattamento è adatto agli adulti e ai bambini dai 4 anni in su.

## 2. COSA BISOGNA SAPERE PRIMA E DOPO IL TRATTAMENTO

## EndWarts FREEZE non deve essere utilizzato:

- nei bambini al di sotto dei 4 anni;
- su viso, area inguinale e genitale, cuoio capelluto o mucose;
- sulla cute sana (pelle senza verruche);
- su verruche localizzate su pelle sensibile. È necessario prestare particolare attenzione nel trattamento di aree con cute sottile;
- se la verruca e/o la cute circostante sanguina, è aperta, irritata, infetta o arrossata oppure causa prurito;
- se non si è sicuri che l'alterazione cutanea sia una verruca comune consultare il proprio medico prima dell'uso;
- su nevi, calli, vesciche, altre alterazioni cutanee o su punti della cute che potrebbero essere tumori cutanei (melanomi);
- su vescicole contenenti liquido (il cosiddetto "molluscum contagiosum") o su altre vescicole cutanee;
- in gravidanza o allattamento;
- nei diabetici o nelle persone con problemi circolatori o disturbi della coagulazione sanguigna;
- su più verruche contemporaneamente in posizione molto ravvicinata. Aspettare 14 giorni prima di trattare la verruca successiva.

## Misure di sicurezza

- Non inalare. Solo per uso esterno. **Conservare il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.**
- Non applicare per più di 15 secondi su mani e braccia o 40 secondi sui piedi. Un'applicazione eccessivamente lunga o non corretta può causare dolore e danneggiare la cute o i nervi.
- I bambini possono essere trattati con EndWarts FREEZE solo da un adulto.
- Il protossido di azoto è un gas atossico, non infiammabile ma comburente. Tenere lontano da fiamme libere e materiali facilmente infiammabili. Non fumare e non utilizzare vicino a fiamme libere.
- **Non forzare l'apertura né bruciare la cartuccia neanche dopo l'impiego:** il dispositivo è sotto alta pressione e non deve essere aperto.

## Per un risultato ottimale sulle verruche dei piedi

La presenza di cute dura sulla verruca rende più difficile il congelamento. Per ottenere un risultato ottimale sulle verruche dei piedi:



- Immergere l'area da trattare in acqua tiepida finché la pelle non diventa morbida.
- Nelle verruche plantari con crescita verso l'interno rimuovere con cura l'eventuale cute sovrastante, per es. con una lima per piedi.
- Prima del trattamento assicurarsi che la verruca e la pelle circostante siano completamente asciutte.
- La verruca non deve essere limata con la lima perché può ammorbidirsi e sviluppare una nuova superficie dura.

## Dopo il trattamento con EndWarts FREEZE

L'applicazione di EndWarts FREEZE provoca prurito/bruciore e la pelle può dolere: tali effetti dovrebbero scomparire in poche ore. Subito dopo il trattamento l'area trattata si colora di bianco. Poco dopo la pelle assume nuovamente il suo colore normale e la verruca appare di colore rosso.

Dopo la crioterapia, già dopo pochi minuti o in qualche giorno, può svilupparsi una vescica, a volte piena di sangue: si tratta di una normale conseguenza del processo di congelamento che indica solitamente il buon esito del trattamento. Non cercare di scoppiare questa vescica. Se necessario proteggerla con una fasciatura sterile o disinfettarla in modo appropriato in caso di rottura.

La verruca trattata scompare lentamente dopo 10-14 giorni. Il completo ripristino della cute potrebbe tuttavia richiedere un tempo maggiore.

Nel caso di verruche plantari è possibile che camminare possa provocare dolore. L'applicazione di un cerotto per calli sull'area interessata può alleviare il dolore.

- Non toccare il punto trattato e non cercare di strappare e la verruca;
- Mantenere pulito il punto trattato e all'occorrenza disinfettarlo.
- Già subito dopo il trattamento è possibile fare il bagno o la doccia.

## Devo ripetere il trattamento?

EndWarts FREEZE è molto efficace: già pochi secondi dopo l'applicazione il centro della verruca viene raggiunto e distrutto grazie alle basse temperature. Normalmente è sufficiente un'unica applicazione. In caso di verruche vecchie o grandi può essere necessario più di un trattamento, soprattutto se si tratta di verruche plantari.

La verruca scompare lentamente dopo 10-14 giorni. Se la verruca (o una sua parte) non scompare entro 14 giorni, ripetere il trattamento e i punti 2, 3 e 4. Vedi sezione 6 "COME SI APPLICA ENDWARTS FREEZE".

## Consultare il proprio medico:

- se lei o suo figlio manifesta effetti collaterali non previsti;
- se la verruca non guarisce;
- se dopo tre trattamenti la verruca non è sparita.

## 3. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

## Tra i possibili effetti indesiderati vi sono:

- vesciche intorno all'area trattata (ciò può variare di caso in caso; si veda il punto 2: „Dopo il trattamento con EndWarts FREEZE”);
- decolorazione della cute (chiamata „depigmentazione”);
- lievi ustioni e formazione di cicatrici;
- rischio di danni a cute e nervi (per es. in caso di eccessiva durata dell'applicazione).

## 4. COME CONSERVARE ENDWARTS FREEZE

## Prima del primo utilizzo:

- Conservare in luogo fresco e asciutto (5-25°C).
- Non conservare nel congelatore.
- Non esporre mai a temperature superiori ai 50°C. Non conservare in macchina, roulotte o in altri luoghi soggetti ad un aumento della temperatura. Un innalzamento della temperatura danneggia il dispositivo compromettendone permanentemente il funzionamento.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di calore.

## Dopo ogni utilizzo:

- Richiudere il cappuccio e conservare in frigorifero: così facendo si prolunga la durata di EndWarts FREEZE e si aumenta il numero delle possibili applicazioni.

- Non conservare nel congelatore.
- Durante l'immagazzinamento o la conservazione non esporre il dispositivo attivato a temperature superiori a 35°C: in tal caso si attiva infatti un meccanismo di sicurezza che impedisce permanentemente il funzionamento del dispositivo.
- Dopo l'uso attendere due minuti, smaltire la punta usa-e-getta e sostituirla con una nuova. EndWarts FREEZE è ora pronto per la successiva applicazione.

- Per pulire le parti di plastica del dispositivo utilizzare esclusivamente un panno umido.

## 5. ULTERIORI INFORMAZIONI

## Confezione e data di scadenza

- Ogni confezione contiene una cartuccia di EndWarts FREEZE con 7,5 g di protossido di azoto (in forma liquida), un set di 6 punte usa-e-getta e le istruzioni per l'uso.
- Durata di conservazione in frigorifero dopo la prima attivazione: 2 mesi.
- Dopo la data di scadenza indicata sulla confezione questo prodotto non deve più essere utilizzato.
- Smaltire il prodotto vuoto.

## Cosa fare quando il dispositivo è vuoto o non funzionante

- Se dopo la riuscita attivazione (punto 1) e caricamento del dispositivo (punto 2) non appare il vapore freddo, il gas è esaurito. Utilizzare un nuovo EndWarts FREEZE.
- Se dopo l'attivazione del dispositivo si sente un sibilo continuo e il gas fuoriesce, il dispositivo è difettoso. Non cercare di aprirlo né di ripararlo, anche se lo si ritiene vuoto. Riportare il prodotto alla propria farmacia.

\* La documentazione è disponibile presso il produttore.


## 6. COME SI APPLICA ENDWARTS FREEZE

## ! PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO LEGGERE I PASSI DA 1 A 4.

## 1 ATTIVARE

## SOLO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO!

EndWarts Freeze deve essere attivato una volta.

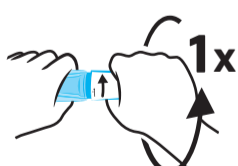

Avvitare il cappuccio di almeno un giro completo fino ad allineare nuovamente la stella e la zona grigia. **A tal fine è necessario applicare un po' di forza.**

Non è un problema se la stella oltrepassa la zona grigia.

**Non ripetere mai il punto 1 dopo aver attivato con successo il dispositivo.**

## 2 CARICARE

Prima di ciascun trattamento con EndWarts Freeze, si deve caricare il dispositivo con gas freddo.



Posizionare EndWarts FREEZE in posizione verticale, con la parte trasparente rivolta in basso, su un tavolo. Con una mano tenere ben fermo EndWarts FREEZE in modo che non scivoli dalla superficie. Con l'altra mano premere la parte bianca del dispositivo verso il basso **per due secondi esatti.** Questa operazione produce un rumore di sibilo.

Se si preme più a lungo, si sprecano dosi preziose, mentre se si preme troppo brevemente, si riduce l'effetto congelamento.

## 3 CONTROLLARE



Rimuovere il cappuccio trasparente e **applicare il prodotto immediatamente!**

Controllare se è **visibile del vapore freddo.**

Se il vapore freddo non fuoriesce, ripetere il punto 2.

## 4 TRATTARE



Premere con decisione la punta di EndWarts FREEZE sulla verruca. **Per un migliore risultato rispettare esattamente il tempo indicato!**

- 15 secondi su mani, dita e braccia
- 40 secondi sui piedi

**Rimettere il cappuccio. FATTO!**

**Dopo l'uso conservare in frigorifero**

La verruca scompare lentamente dopo 10-14 giorni. Se la verruca (o una sua parte) non scompare entro 14 giorni, ripetere i punti 2, 3 e 4.